



# Sicherer Transport von Probenmaterial

## Postversand

Institut für Pathologie  
MVZ gGmbH, Abteilung Pathologie

### Vorschrift zum Probentransport

Wir als Pathologie müssen sicherstellen, dass bei jeglichem Probentransport zu uns bestimmte Vorschriften (z.B. P650 light) eingehalten werden. Diese Vorschriften regeln u.a. die ordnungsgemäße Verpackung zum Versand von Patientenproben und den Schutz patientenbezogener Daten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Eine geeignete Verpackung für den Probentransport per Post besteht immer aus folgenden Bestandteilen:

- Probengefäß:** Dieses ist i.d.R mit Formalin gefüllt und beinhaltet die Probe
- Sekundärverpackung:** Diese dient zum Schutz vor Kontamination, falls das Probengefäß auslaufen sollte
  - Saugeinlage:** Es muss in der Sekundärverpackung immer eine Saugeinlage verwendet werden, welche die komplette Flüssigkeit aus dem Probengefäß aufsaugen könnte.
- Transportverpackung:** Versandtasche

### Anforderung von Versandmaterial

Um Versandmaterialien bei uns anzufordern, verwenden Sie bitte unseren Bestellschein. Auf diesem sind alle Materialien aufgelistet, welche wir Ihnen für den sicheren Versand zur Verfügung stellen.

Bestellschein Versandmaterial			
Institut für Pathologie und MVZ gGmbH, Abteilung Pathologie Tel.: 0911 / 2991 1380 Fax: 0911 / 7180 1862 Bestellungen: pathologie@klinikum-fuerth.de			
Hinweis: Bestellungen sind nur in vollständig verpackten Kartons (V2) möglich. Weitere Informationen und alle unsere Untersuchungsabläufe finden Sie ab sofort auch bestellbar auf unserer Homepage.			
Bitte per E-Mail oder Fax senden			
Klinik/Praxis/Arztname	Herrn/Madam	Inhalt pro VE	Bestellung Anzahl der VE
Adresse			
Telefon			
Anfordende Person			
Datum, Unterschrift			
Versandmaterialien			
Bezeichnung	Herrsteller	Inhalt pro VE	Bestellung Anzahl der VE
Untersuchungsantrag zu allgemeinem histologischen zytologischen Befund			
Diese Formulare können direkt von der Homepage ausgedruckt werden.			
Untersuchungsantrag zur manuellen histologischen zytologischen Zytodiagnostik zur Begutachtung			
Antrag auf zytologische Zytodiagnose			
Erwähnung zur Privatbesteller		1 Stk	
Patientenkenn-Nr./Probennummer		44 Elstetten	
Friseur		Reichert	
Obstetric, weib.		Engelsdorf	
Obstetric, männl.		Engelsdorf	50 Stk
Obstetricgewinnshalter für 2 OT			1 Stk
Gynäkologische Befunde			
Bezeichnung	Herrsteller	Inhalt pro VE	Bestellung Anzahl der VE
CellsOn™ Smear	weiss	Empfehlung: 100 Stk	
Normaler Brust	grau	Empfehlung: 100 Stk	
Rivers Cervix Cytobrush	grau	Reichert	25 Stk
Thin Prep® PAP Test	schwarz	Reichert	25 Stk
Cell Collection Medium Kit (40%)	schwarz	Reichert	25 Stk
Seite 1 von 1			

Sie können ihn auf unserer **Homepage** herunterladen (<https://www.klinikumfuerth.de/de/medizin/pathologie/einsendung-gewebeproben.php>)

oder per Email bestellen ([bestellungen.pathologie@klinikum-fuerth.de](mailto:bestellungen.pathologie@klinikum-fuerth.de)).

Außerdem legen wir jeder Bestellung einen neuen Schein bei.

# Sicherer Transport von Probenmaterial

Postversand

Institut für Pathologie  
MVZ gGmbH, Abteilung Pathologie

## Auswahl der Probengefäße

Wir stellen Ihnen folgende Probengefäßen zur Verfügung:

Gefüllt (ca. halb voll) mit Formalin:



20ml

50ml

100ml

Bereits im Sekundärgefäß



180ml    250ml    500ml    1L

Ohne Sekundärgefäß

Für gynäkologische Zytologie:



Thinprep

**Bitte wählen Sie das geeignete Gefäß für das Probenmaterial!**

**Das Volumenverhältnis Gewebe zu Formalin sollte mindestens **1:3** betragen, damit eine aussagekräftige Befundung gewährleistet werden kann.**

Objektträger: Objektträgerschachteln

**Bitte nicht die Schachtel, sondern den OT mit Bleistift beschriften!**




# Sicherer Transport von Probenmaterial

## Postversand

Institut für Pathologie  
MVZ gGmbH, Abteilung Pathologie

## Auswahl der Sekundärverpackung

Formalingefäße bis 100ml mit bereits vorhandenem Sekundärgefäß:

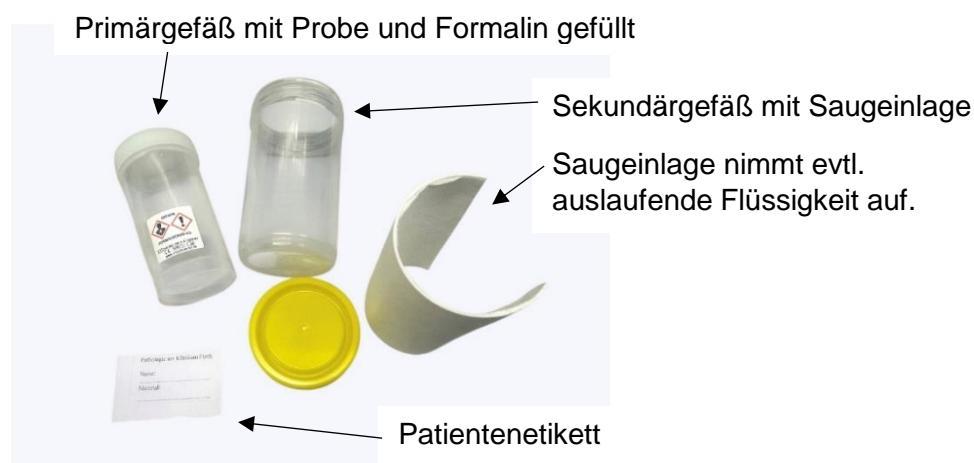

Formalingefäße bis 1 Liter, Gynäkologische Proben (Thinprep) und Urinbecher:



Bitte verwenden Sie diese flüssigkeitsdichten Tüten mit Saugeinlage als Sekundärverpackung.

Es gibt sie in den Größen A6, A4/A5 und A3.

Fest zukleben!

**Bitte keine Antragscheine in die Tüte legen!**

Zytologische Proben:



Verpackung für Zytoröhrchen und EDTA-Blut  
Beschriften Sie nur die Probengefäße, nicht die Verpackung!

Für Urinbecher verwenden Sie bitte eine der oben gezeigten Plastiktüten.

# Sicherer Transport von Probenmaterial

## Postversand


Institut für Pathologie  
MVZ gGmbH, Abteilung Pathologie

## Patientenetiketten

- **Immer** auf das Probengefäß kleben!
- **Leserlich** und mit **wasserfestem** Stift beschriften!
- **NICHT** auf den **Deckel** kleben.

## Antragscheine

Die Antragsscheine stellen wir Ihnen zum Download auf unserer Internetseite bereit (<https://www.klinikum-fuerth.de/de/medizin/pathologie/einsendung-gewebeproben.php>). Alternativ können Sie diese auch auf Anfrage bei uns bestellen. Verwenden Sie hierfür bitte den Bestellschein (siehe oben).

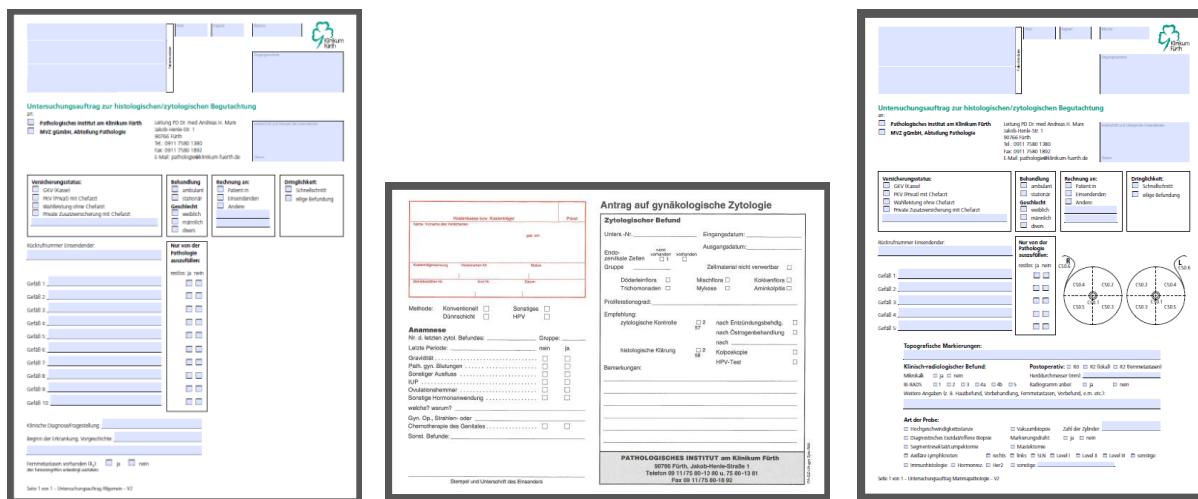

Bitte achten Sie auf die mögliche Notwendigkeit einer Privatliquidation oder eines Überweisungsscheins!

## Transportverpackung

Anschließend werden die eingepackten Proben (im Probengefäß und der Sekundärverpackung) zusammen mit dem Antragschein in eine Transportverpackung gestellt:

### Blaue Versandtasche



Sie können eine Versandtasche für mehrere Patientenproben (auch von unterschiedlichen Patienten) verwenden.

Bitte nur mit den dazugehörigen Kunststoffclips verschließen!

Bitte nicht tackern!